



Báscula para Bebés y Adultos

Baby and Personal Scale



Pesa en kilogramos y libras

Diseño desmontable

BABEPE-180



Funciona con 4,5 Vcc
(3 baterías AAA de 1,5 Vcc
incluidas)

180 kg / 5 g

Capacidad Máxima / División Mínima

CONOZCA SU BÁSCULA

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza durabilidad ya que la báscula BABEPE-180 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO modelo BABEPE-180 y le será útil para futuras referencias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CLASE DE EXACTITUD

Media (III)

CAPACIDAD

Máx = 180kg Min = 100 g

$50\text{ g} \leq m \leq 10\text{ kg}$, $d=e=5\text{g}$
 $10\text{ kg} \leq m \leq 25\text{ kg}$, $d=e=10\text{g}$
 $25\text{ kg} \leq m \leq 180\text{ kg}$, $d=e=50\text{g}$


$T = 180\text{ kg}$

ALIMENTACIÓN

Funciona con 4,5 Vcc
(3 baterías AAA de 1,5 Vcc incluidas)

TEMPERATURA DE OPERACIÓN

0°C a 40°C

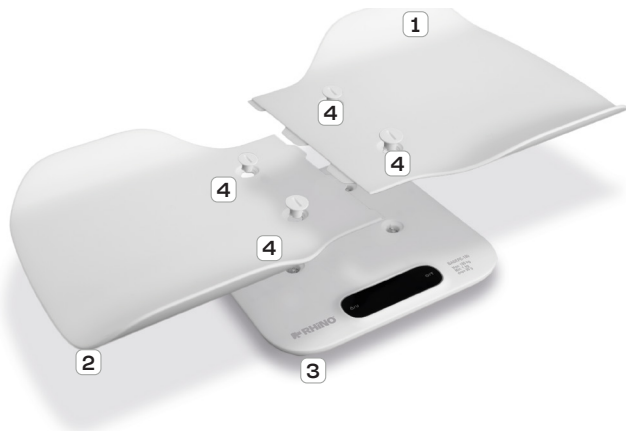

1

Bandeja derecha

2

Bandeja izquierda

3

Superficie báscula

4

Tornillos

ICONOS DE PANTALLA



1. ¡PERFECTA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS!

Su bandeja ergonómica permite pesar a los bebés de forma segura y cómoda.



2. BANDEJA REMOVIBLE

Gracias a su diseño modular, la bandeja se puede retirar fácilmente para adaptar la báscula a diferentes necesidades.



3. ¡LISTA PARA ADULTOS!

Al retirar la bandeja, se convierte en una báscula ideal para pesar adultos de manera precisa.






CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- **Diseño versátil:** La bandeja desmontable permite adaptar fácilmente la báscula para pesar de manera cómoda y precisa a bebés y adultos.
- **Rotación automática de dígitos:** La báscula ajusta automáticamente la orientación de los dígitos según el peso detectado:

Modo Bebé (≤ 25 kg): Los dígitos se muestran hacia la persona que está pesando al bebé, facilitando la lectura.

Modo Adulto (> 25 kg): Los dígitos rotan 180° para que la persona sobre la báscula pueda ver su peso directamente.

- **Comparación de diferencia:** Cuando el resultado de la medición es ≤ 25 kg, la pantalla muestra la diferencia de peso en comparación con el último registro.
- **Bloqueo automático:** Cuando el resultado de la medición es > 2 kg, el peso se bloquea automáticamente.
- **Modo de bloqueo para bebés:** Para evitar que el bebé presione los botones, las funciones de los botones se desactivan en este modo.

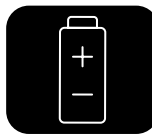

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

- Utilice un destornillador para retirar el tornillo de la tapa de las baterías.
- Abra la tapa de las baterías e instale las baterías en la dirección correcta, como se muestra en la imagen. **(Fig.1)**

Nota: Por favor, use baterías correspondientes.

- Ajuste los tornillos firmemente.
- Si no se usará por un largo período (más de tres meses), retire las baterías.

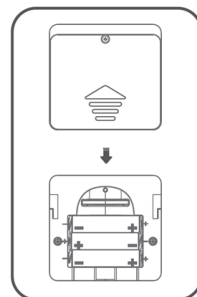


Fig.1




INDICACIONES DE ERROR

- **Err:** Indicación de sobrecarga
La báscula está sobrecargada (la capacidad máxima de peso está indicada en la báscula).
Por favor, bájese de la báscula para evitar daños.

- **LO:** Indicación de batería baja
La batería tiene poca carga. Por favor, instale una batería nueva.

- **♂/U Modo de Bloqueo para Bebés**
En este modo, las funciones de los botones estarán desactivadas.

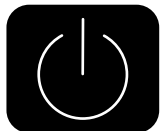

FUNCIONES DE LOS BOTONES

⏻/T Botón ON/OFF:

- Oprima el botón: Enciende la báscula.
- Oprima el botón durante 5 segundos: Apaga la báscula.
- Oprima el botón 2 segundos en modo de pesaje: Realiza la función de **TARA**.

♂/U Botón UNIT:


- Presione una vez: Cambia entre las unidades de medida cuando la báscula está encendida.
- Presione brevemente el botón (aproximadamente 1 segundo) en estado de peso bloqueado para bebés: Borra y bloquea nuevamente la lectura.
- Presione el botón durante 5 segundos: Activa el modo de bloqueo para bebés cuando la báscula está encendida.
- Presione el botón durante 5 segundos nuevamente: Desactiva el modo de bloqueo para bebés.




MODO PESAJE PARA BEBÉS

MONTAJE DE LA BANDEJA


- Ensamble las dos bandejas de manera firme y colóquelas sobre la plataforma de pesaje.
- Alinee los orificios de la bandeja con los orificios de la plataforma.

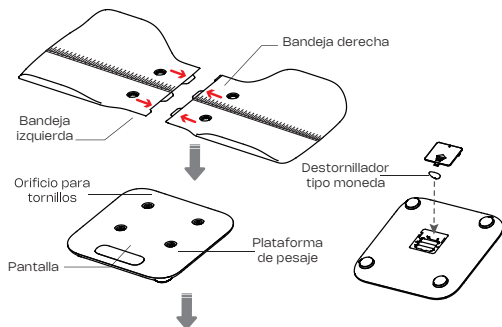



- Inserte los orificios de la bandeja en los orificios de la plataforma de pesaje completamente y luego ajuste los tornillos.

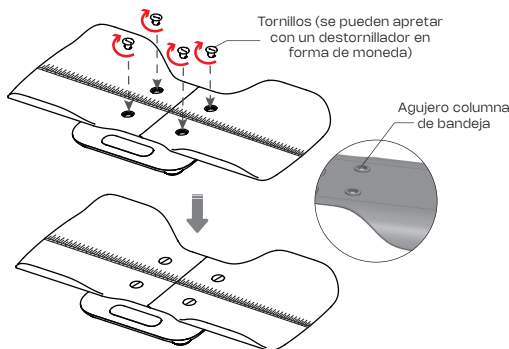

PROCESO DE PESAJE

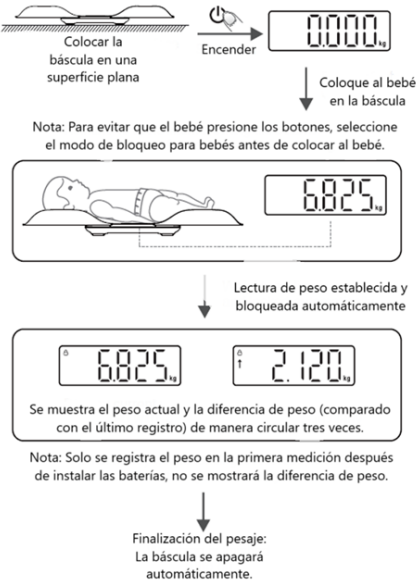


PROCESO DE PESAJE

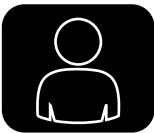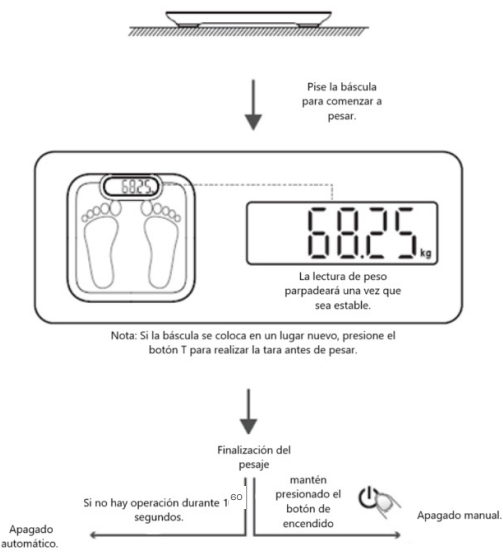


MODO PESAJE PARA ADULTOS

DESMONTAJE DE LA BANDEJA

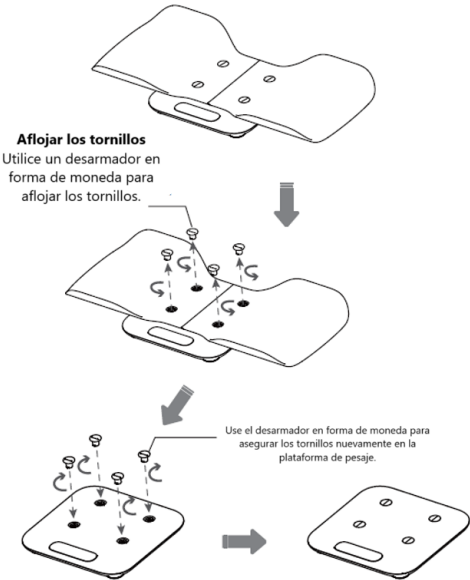

APAGADO AUTOMÁTICO

La báscula está equipada con una función de apagado automático para ahorrar energía. Si no se detecta ninguna operación durante un período de 60 segundos, la báscula se apagará automáticamente. Esta función ayuda a prolongar la vida útil de la batería y asegura un uso eficiente de la báscula.

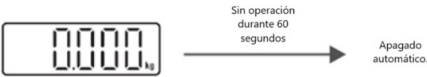



LIMPIEZA Y CUIDADO

- Limpie la báscula con un paño ligeramente húmedo. NO sumerja la báscula en agua ni utilice agentes de limpieza químicos o abrasivos.
- Todas las partes de plástico deben limpiarse inmediatamente después del contacto con grasas, especias, vinagre y alimentos con sabores o colores fuertes. Evite el contacto con ácidos o jugos cítricos.
- Utilice siempre la báscula sobre una superficie sólida y plana.
- Evite golpes, impactos y caídas del producto.
- Esta báscula es de precisión, manéjelo con cuidado.
- Mantenga la báscula alejada de altas temperaturas; guárdela en un lugar fresco y seco.
- Verifique las baterías si la báscula no enciende.
- Diseñada para uso familiar y no comercial.

PÓLIZA DE GARANTÍA

La báscula BABEPE-180 marca Rhino® que usted ha adquirido, cuenta con 2 años de garantía bajo defecto de fabricación, a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza sellada y con la fecha por su distribuidor, recibo de compra o factura junto con la báscula en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días; transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por una báscula equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería y la calibración o ajuste de peso de la báscula.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando la báscula se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando la báscula hubiese sido alterada o reparada por personal no autorizado.
- Cuando la báscula hubiese sido dañada por insectos o plagas.
- Daño causado por descargas eléctricas.
- Daño causado por derrame de líquidos o humedad.

Si el centro de servicio autorizado se niega a hacer válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 55 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242; o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, México; C.P. 54918.

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4,
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán
de Zaragoza, Estado de México, México,
C.P. 52977, Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7

¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a sus básculas o hacer válida la garantía.

Servicio, mantenimiento y refacciones:

55 4429 0229 en la CDMX

o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

CENTROS DE SERVICIO RHINO



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 55 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx
rhino.mx

Sello del distribuidor